



- Komfortabler, faltbarer Leichtgewichts-Rollstuhl für den täglichen Gebrauch
- Hohe Cross-Kompatibilität innerhalb der **Action®**-Familie sowie anderen Invacare Rollstühlen erlaubt individuelle Anpassungen
- HD-Version (bis 160 kg) und Hemi-Version als klinische Lösung erhältlich

Einfach zu manövrieren

- Dank der Doppelkreuzstrebe ist der Rahmen sehr stabil für hervorragende Laufeigenschaften
- Verschiedene Einstellmöglichkeiten der Hinterradposition ermöglichen die einfache Anpassung an unterschiedliche Rollcharakteristiken

Kompatibilität mit anderen Invacare Rollstühlen

- Höchste Flexibilität, da nahezu alles anpassbar ist (Höhe der Rückenlehne, Armlehnen, Fußstützen)
- Der überwiegende Teil der am Rahmen befestigten Bauteile ist kompatibel zu anderen Invacare Rollstühlen, z.B. **Action®_{NG}**-Familie, *Rea®*, etc.

Einfacher Transport durch geringes Gewicht

- Nach dem Entfernen der Hinterräder ist er leicht zusammenfaltbar für den Transport
- Ohne Hinterräder geringes Gewicht von nur 8,0 kg

Optionen und Merkmale



Vorderradaufnahme

Die Vorderradaufnahme aus Aluminium und ein neues Gabeldesign kombinieren Gewichtseinsparung mit Stil.



Transportbefestigung

Ein signalfarbener Haken ermöglicht die einfache und sichere Befestigung in einem Kraftfahrzeug.



Hinterradaufnahme

Die neue Hinterradaufnahme aus Aluminium kombiniert Leichtigkeit mit Funktionalität.



Doppelgreifreifen

Die Antriebsversion mit Doppelgreifreifen ist ideal für halbseitig gelähmte Nutzer.

Optionen und Merkmale



Beinstützen / Fußplatten

① 80°-Standard-Beinstützen, ② hoch- und abschwenkbare Beinstützen, ③ winkel- und tiefeinstellbare Fußplatten oder ④ einteilige Fußauflage. Auch als Version für Amputierte erhältlich ⑤.


Technische Daten

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Armlehnenhöhe	Länge der Fußstützen	Sitzwinkel	Rückenlehnenwinkel
Invacare® Action ^{HD} NG	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 ¹ / 555 ¹ / 605 ¹ mm	400 - 450 mm / 450 - 500 mm	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm 460 / 485 / 510 mm (Transit)	325 - 510 mm 380 - 460 mm (Transit)	200 - 280 / 240 / 170 - 295 / 210 - 345 mm	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	0° / 3° / 6°	0° / 7° / 0° - 30° / -15° - +15°
	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Gesamtbreite gefaltet	Gesamtwicht	Max. Benutzergewicht	Transportgewicht
Invacare® Action ^{HD} NG	SB + 190 mm SB + 160 mm (Transit)	810 - 1040 mm 910 - 1040 mm (Transit)	990 - 1180 mm 950 - 1050 mm (Transit)	850 - 1025 mm 805 - 905 mm (Transit)	305 mm 265 mm (Transit)	ab 14,0 kg ab 14,5 kg (Transit)	125 / 160 kg ¹	ab 8,0 kg ab 11,7 kg (Transit)
	Max. sichere Neigung	Minimaler Wenderadius	Crash Test					
Invacare® Action ^{HD} NG	7°	790 mm	ISO 7176-19 ²					



1. Heavy Duty Version
2. Unsere Rollstühle entsprechen der ISO Norm 7176-19 sowie ISO 10542 und haben zusätzliche Eigenschaften, die erweiterte Benutzersicherheit bei der Fahrt in einem Kfz bieten. Generell sollten Rollstuhlbenutzer möglichst Fahrzeugsitze oder fahrzeugseitig installierte Rückhaltesysteme benutzen.

Rahmenfarben

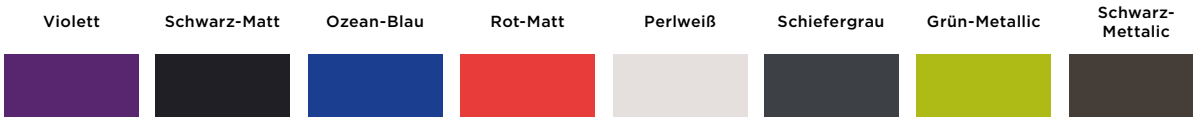

Polsterung

Nylon Schwarz

